



RESmart[®] Auto CPAP System

Εγχειρίδιο Γρήγορης Λειτουργίας Χρήστη

Σύμβολα

Κουμπιά ελέγχου



Εκκίνηση Πίεσης / Παύση



Εκκίνηση Ράμπας



Υγραντήρας ON / OFF



Κουμπι Χρήστη



Κουμπι Χρήστη

Συσκευή



Προσοχή, Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



Εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF



Κατηγορία II (με διπλή μόνωση)



Τροφοδοσία AC

IPX1 Προστασία από σταγόνες, κάθετες

SN Σειριακός αριθμός προϊόντος



Κατασκευαστής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Ευρωπαϊκή Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Προοριζόμενη Χρήση

Το σύστημα RESmart® Auto είναι μία συσκευή CPAP (συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών), αποκλειστικά σχεδιασμένη για τη θεραπεία της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας ενηλίκων (OSA).

Η συσκευή RESmart® Auto προορίζεται για χρήση μόνο κατόπιν εντολής αδειοδοτημένου ιατρού. Η Αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις πίεσης, σύμφωνα με την ιατρική συνταγή του θεράποντα ιατρού σας.

Υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά εξαρτήματα, έτσι ώστε να καθιστούν τη θεραπεία της OSA με το σύστημα RESmart® Auto όσο το δυνατόν πιο βολική και άνετη για εσάς. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνετε την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία που συνταγογραφήθηκε για εσάς, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα της BMC.

Προδιαγραφές

Μέγεθος Συσκευής

Διαστάσεις: 220 × 194 × 112 mm, 313 × 194 × 112 mm (με τον InH2® θερμαινόμενο υγραντήρα)

Βάρος: 1.6kg, 2.4 kg(με τον InH2® θερμαινόμενο υγραντήρα)

Χρήση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντος

Λειτουργία

Μεταφορά και αποθήκευση

Θερμοκρασία: 5 έως 30°C

-20 έως 55°C

Υγρασία: ≤ 80% χωρίς συμπύκνωση ≤ 93% χωρίς συμπύκνωση

Ατμοσφαιρική Πίεση: 860 έως 1060 hPa

500 έως 1060 hPa

Τρόπος Λειτουργίας

Συνεχής

Κατάσταση Λειτουργίας

CPAP, Auto, Titrate

Κατανάλωση Ισχύος AC

100 – 240V AC, 50/60Hz , 1.0A μεγ.

Τύπος προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

Εξοπλισμός κατηγορίας II

Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

Εξάρτημα τύπου BF

Βαθμός προστασίας έναντι εισχώρησης νερού

IPX1 –Προστασία από σταγόνες, κάθετες

Εύρος πίεσης

4 έως 20 hPa (σε προσαυξήσεις 0,5 hPa)

Σταθερότητα πίεσης

4έως 20 hPa (± 1 hPa)

Αντιστάθμιση Υψομέτρου

Χειροκίνητη ρύθμιση, Επίπεδα 0, 1, 2

Αυτόματη ρύθμιση

Στάθμη θορύβου πίεσης

<30 dB, όταν η συσκευή λειτουργεί σε πίεση 10 hPa

Μέγιστη Ροή

Πίεση Δοκιμής(hPa)	4	8	12	16	20
Μέγιστη ροή στη θύρα σύνδεσης ασθενούς(L/min)	70.1	73.6	75.9	73.0	73.4

Διαθέσιμες Θεραπείες


Η συσκευή RESmart® Auto CPAP χρησιμοποιείται για την χορήγηση των ακόλουθων θεραπειών:

CPAP – Χορήγηση συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών. Η CPAP διατηρεί ένα σταθερό επίπεδο πίεσης σε ολόκληρο τον κύκλο αναπνοής. Εάν ο θεράπων ιατρός σας σας έχει συνταγογραφήσει κλιμάκωση της πίεσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της Ράμπας για να ξεκινήσει η πίεση από χαμηλά και στη συνέχεια να αυξηθεί σταδιακά έως την θεραπευτική πίεση, έτσι ώστε να μπορείτε να κοιμηθείτε πιο άνετα.

Auto – Χορήγηση θεραπείας CPAP και παροχή πίεσης αέρα βάσει των αναγκών του ασθενούς.

Titrate - Παραδίδει τη θεραπεία CPAP, ενώ ρυθμίζοντας αυτόματα το επίπεδο πίεσης για να καλύψει τις ανάγκες του ασθενούς. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της βέλτιστης σταθερής πίεσης CPAP του ασθενούς.

Λειτουργίες συστήματος

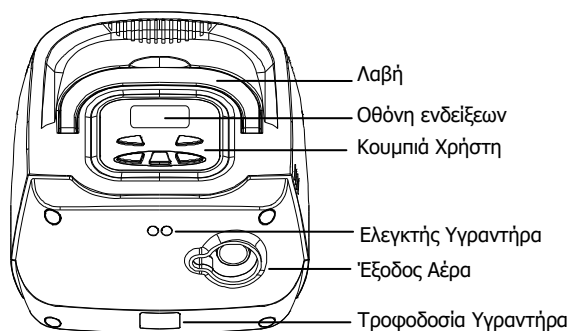

Λαβή: Χρησιμοποιείται για να κρατείται η συσκευή.


Οθόνη ενδείξεων: Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος, την συνολική ώρα λειτουργίας και τις ώρες θεραπείας.

Κουμπιά χρήση: Χρησιμοποιούνται για να ανοιγοκλείσουν την συσκευή και να πραγματοποιήσουν κάποιες ρυθμίσεις.

Ελεγκτής Υγραντήρα: Αυτός ο ελεγκτής ενεργοποιεί τον InH2[®] θερμαινόμενο υγραντήρα και επιτρέπει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Ο υγραντήρας είναι προαιρετικό εξάρτημα που μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.

Έξοδος αέρα: Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (coaxial 22 mm) εδώ.

Τροφοδοσία Υγραντήρα: Παρέχει ρεύμα στον InH2[®] θερμαινόμενο υγραντήρα.

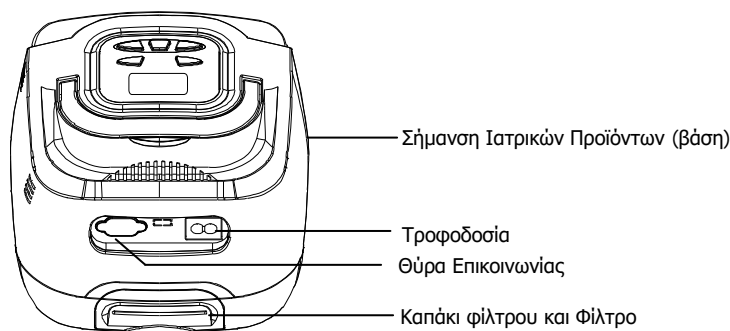

Σήμανση Ιατρικών Προϊόντων: Για ευκολία στους σταθμούς ελέγχου των αεροδρομίων, υπάρχει μία σήμανση στην βάση του RESmart[®] Auto, που υποδεικνύει ότι πρόκειται για ιατρικό εξοπλισμό. Θα είναι επίσης χρήσιμο να έχετε και αυτό το εγχειρίδιο μαζί.

Τροφοδοσία AC: Συνδέστε/αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος εδώ.

Θύρα επικοινωνίας: Για κλινική χρήση με το Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων. Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας εδώ.

Καπάκι Φίλτρου και Φίλτρο: Το φίλτρο αποτρέπει την είσοδο σκόνης στην συσκευή. Το καπάκι έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον θόρυβο του RESmart[®] Auto.

Γλωσσάριο

Άπνοια

Μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από τη διακοπή της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου.

Auto-CPAP

Προσαρμόζει αυτόματα την πίεση CPAP για τη βελτίωση της άνεσης του ασθενούς με βάση την παρακολούθηση της άπνοιας και τα επεισόδια ροχαλητού.

Αυτο Σβηστό

Όταν είναι ενεργοποιημένο αυτό το χαρακτηριστικό, η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη θεραπεία μόλις αφαιρεθεί η μάσκα.

Αυτο Ανοιχτό

Με αυτή τη λειτουργία η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη θεραπεία, όταν αναπνέετε μέσα στη μάσκα. Αυτή η λειτουργία είναι πάντα ενεργοποιημένη.

CPAP

Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών.

iCode

Ένα χαρακτηριστικό που παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της συμμόρφωσης και της θεραπείας χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένους κωδικούς. Το "iCode" αποτελείται από έξι διαφορετικούς κωδικούς που εμφανίζονται στο μενού ασθενούς. Η λειτουργία iCode I εμφανίζει δεδομένα κατά σειρά χαρακτήρων.

LPM

Λίτρα ανά λεπτό.

OSA

Αποφρακτική Υπνική Άπνοια.

Μενού ρυθμίσεων ασθενούς

Η κατάσταση προβολής στην οποία μπορείτε να τροποποιήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, τις προσαρμόσιμες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως η πίεση εκκίνησης για την λειτουργία κλιμάκωσης.

Λειτουργία Ράμπας

Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να αυξήσει την άνεση του ασθενούς κατά την έναρξη της θεραπείας. Το χαρακτηριστικό της ράμπας μειώνει την πίεση και στη συνέχεια αυξάνει σταδιακά την πίεση σύμφωνα με τη συνταγογραφημένη ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορείτε να κοιμηθείτε πιο άνετα.

Reslex

Μία λειτουργία θεραπείας που αν ενεργοποιηθεί παρέχει ανακούφιση πίεσης κατά την διάρκεια της εκπνοής.

Κατάσταση αναμονής

Κατάσταση της συσκευής κατά την οποία παρέχεται τροφοδοσία, αλλά η παροχή αέρα είναι απενεργοποιημένη.

Titrate

Ένα είδος λειτουργίας που παρέχει CPAP θεραπεία ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει αυτόματα την πίεση ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Ρύθμιση για πρώτη φορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε το RESmart® Auto μέχρι να σας το ρυθμίσει κάποιος ειδικευμένος! Για να παραγγείλετε παρελκόμενα που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα συσκευασία, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ συνδέετε οποιονδήποτε εξοπλισμό στο RESmart® Auto εκτός αν σας το έχει προτείνει η BMC ή ο προμηθευτής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν το RESmart® Auto εκτεθεί σε πολύ υψηλές ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε το να προσαρμοστεί σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 2 ώρες) προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση.

Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Τοποθέτηση του φίλτρου και του καπακιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το φίλτρο πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής.

α. Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση του στο πίσω μέρος της συσκευής RESmart® Auto.

β. Προσαρμόστε το καπάκι του φίλτρου. Τοποθετήστε το καπάκι έτσι ώστε η μικρή οπή να βλέπει προς τα κάτω. Εισάγετε το καπάκι στις υποδοχές.

Καλώδιο ρεύματος

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή στο πίσω μέρος του RESmart® Auto. Εισάγετε το καλώδιο στην πρίζα. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί η κατάσταση του συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το RESmart® Auto είναι ενεργοποιημένο για χρήση μόνο όταν τοποθετείται στο ρεύμα. Το κουμπί της εκκίνησης/παύσης της πίεσης εκκινεί ή σταματά τον φυσητήρα.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή επίπεδη επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι μακριά από εξοπλισμό ψύξης ή θέρμανσης. Επίσης ότι οι αεραγωγοί της συσκευής δεν εμποδίζονται από κουρτίνες, πετσέτες κλπ. Ο αέρας πρέπει να ρέει ελεύθερα γύρω από την συσκευή για να λειτουργεί σωστά το σύστημα.

Οθόνη: Όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής εμφανίζονται εδώ.


Κουμπί εκκίνησης/παύσης πίεσης: Πατήστε για να ξεκινήσει/σταματήσει η ροή του αέρα. ΜΗΝ εκκινήστε την ροή του αέρα εάν δεν έχετε συνδέσει την σωλήνα της μάσκας.

Κουμπί θερμαινόμενου υγραντήρα: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον InH2® Υγραντήρα σε περίπτωση που έχει συνταγογραφηθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υγραντήρα.

Κουμπί ράμπας: Όταν η ροή του αέρα έχει ξεκινήσει, πατήστε αυτό το κουμπί για επανεκκινήστε τον κύκλο της ράμπας (η οποία χαμηλώνει την πίεση του αέρα και σταδιακά την αυξάνει). Αυτό επιτρέπει έναν πιο άνετο ύπνο. Όταν η ροή του αέρα είναι σε παύση, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στο μενού του ασθενούς.

Σημείωση: Η ράμπα δεν συνταγογραφείται για όλους τους ασθενείς.

Κουμπιά χρήση: Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των διάφορων ρυθμίσεων στα μενού του RESmart® Auto.

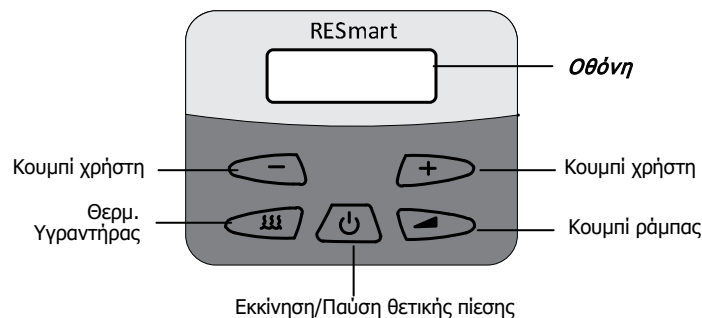


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Στο μενού ρυθμίσεων τα +/- κουμπιά χρήστη χρησιμοποιούνται για πλοήγηση μεταξύ των διαφόρων ρυθμίσεων και εναλλαγής πάνω/κάτω μεταξύ των τιμών, το κουμπί της ράμπας χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της αλλαγής της ρύθμισης, ενώ το κουμπί εκκίνησης επιτρέπει την έξοδο από το μενού χωρίς αποθήκευση.

Κατάσταση αναμονής

4. Μετά την ενεργοποίηση η κατάσταση του συστήματος θα εμφανιστεί στην οθόνη όπως παρακάτω.

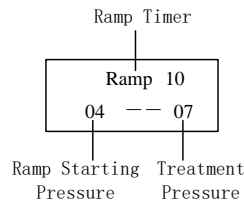

Πίεση εκκίνησης ράμπας: Η αρχική πίεση μετά την έναρξη του φυσητήρα είναι ενεργοποιημένη. Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 4hPa.

Πίεση θεραπείας: Η συνταγογραφημένη πίεση από το γιατρό είναι η βάση για το σύστημα αυτόματης ρύθμισης μετά από το χρόνο ράμπας. Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 7hPa.

Ράμπα Timer: Ο χρόνος ράμπας από την έναρξη της πίεσης στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 10 λεπτά.

Ρυθμίσεις συσκευής

5. Επιβεβαιώστε / Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του RESmart® Auto. Για να ξεκινήσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της ράμπας μέχρι να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων (περίπου 5 δευτερόλεπτα) όταν το σύστημα βρίσκεται σε αναμονή. (Η ροή του αέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πατώντας το κουμπί της ράμπας (όταν η ροή του αέρα είναι ενεργοποιημένη) θα μειώσει την πίεση της ροής του αέρα, εφόσον επιβάλλεται, και στη συνέχεια θα αυξηθεί σταδιακά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το RESmart® Auto αν η οθόνη είναι ασταθής. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περαιτέρω οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί πίεσης Start / Stop και η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη αναμονής του συστήματος.

Ρύθμιση του υγραντήρα

α. Όταν χρησιμοποιείται ο προαιρετικός InH2® θερμαινόμενος υγραντήρας, αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει τη θερμοκρασία και την υγρασία της ροής του αέρα μεταξύ των επιπέδων 0 - 5. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πατήστε το κουμπί της ράμπας να εισέλθετε σε κατάσταση αλλαγής και πατήστε τα πλήκτρα +/- Κουμπιά χρήστη για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πατήστε ξανά το κουμπί της ράμπας για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Πιέστε τα πλήκτρα +/- χρήστη για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση.

Ρύθμιση του υψόμετρου

b. Η ρύθμιση υψόμετρου μπορεί να αλλάξει ανάμεσα στα επίπεδα 0 έως 2. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0.

0 = μικρότερο από 2.460 ft. (<750 m)

1 = 2.460 έως 4.921 ft. (750 m έως 1500 m)

2 = 4.924 έως 8.202 ft. (1501 m έως 2500 m)

* Πάνω από 8.202 ft. = Η πίεση της ροής του αέρα μπορεί να μην είναι ακριβής. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να προσαρμόσει τη ρύθμιση της πίεσης σας.

Altitude 0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το RESmart® έχει προκαθορισμένη αυτόματη ρύθμιση υψόμετρου, ακόμα και αν δεν εισάγετε κάποια από τις ρυθμίσεις, η συσκευή θα προσαρμοστεί ανάλογα με το υψόμετρο που βρίσκεστε.

Ρύθμιση Auto ON

c. Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και φοράτε την μάσκα, η βαθιά ανάσα σας θα ενεργοποιήσει την ροή του αέρα αυτόματα. *(Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)*
Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι ΕΝΕΡΓΟ.

Auto On Enable

Ρύθμιση Auto Off

d. Όταν αφαιρείται η μάσκα η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα. *(Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)* Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι ΕΝΕΡΓΟ.

Auto Off Enable

Ρύθμιση της φωτεινότητας της LCD οθόνης

e. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή της φωτεινότητας σε Auto, On και Off. Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι Auto.

Auto: Το φως θα ανάβει όταν πατιέται κάποιο κουμπί και θα σβήνει μετά από λίγο.

On: Το φως θα είναι μόνιμα ανοικτό.

Off: Το φως θα είναι μόνιμα σβηστό.

Light Auto

Ρύθμιση συναγερμού

f. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση αποσύνδεσης ασθενούς. Όταν μια μεγάλη, συνεχή διαρροή αέρα (όπως η αφαίρεση της μάσκας) έχει ανιχνευθεί στο κύκλωμα, αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ηχητική ειδοποίηση (τον ήχο μπιπ). Αυτή η ρύθμιση είναι αποτελεσματική μόνο όταν η ρύθμιση Auto Off είναι απενεργοποιημένη. *(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.)* Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

Alert Disable

Ρύθμιση του Reslex

Η ρύθμιση Reslex εμφανίζει το επίπεδο Reslex και καθορίζεται από τον ιατρό ή τον προμηθευτή σας.

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο της ανακούφισης της πίεσης του αέρα που

νιώθετε όταν εκπνέετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ο προμηθευτής σας θα έχει ορίσει ένα επίπεδο

Reslex. Εάν αυτό δεν είναι άνετο για σας, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση. Η ρύθμιση

"1" παρέχει μια μικρή ποσότητα ανακούφισης πίεσης. Για να αυξήσετε την ανακούφιση πίεσης, αλλάξτε

τη ρύθμιση σε "2". (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0 (απενεργοποίηση).

Reslex
0

Ρύθμιση της καθυστέρησης στην παύση (Delay Off)

h. Όταν χρησιμοποιείται ο προαιρετικός InH2® θερμαινόμενος υγραντήρας, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη συνέχεια της ροής του αέρα για περίπου 15 λεπτά σε πολύ χαμηλή πίεση (περίπου 2hPa) μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής. Αυτό θα αποβάλλει τους υδρατμούς για την προστασία της συσκευής. Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

DelayOff
Enable

Ρύθμιση της Ευαισθησίας

i. Η ρύθμιση της ευαισθησίας είναι αποτελεσματική μόνο για τη λειτουργία Auto CPAP. Η ευαισθησία της αυτόματης ρύθμισης της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 (μαλακό) έως 5 (σκληρό). Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 3..

Ρύθμιση της ημερομηνίας

j. Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται και μπορεί να τροποποιηθεί, αν χρειαστεί.

Σημείωση: Ελέγξτε και επιβεβαιώστε την ρύθμιση της ημερομηνίας συχνά για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση των δεδομένων του ημερολογίου.

ICode

k. Η ρύθμιση "ICODE" αποτελείται από έξι ξεχωριστούς κωδικούς που εμφανίζονται στο μενού του ασθενή. Οι κωδικοί αυτοί περιλαμβάνουν τα: "Τελευταία Ημέρα", "Τελευταίες 7 Ημέρες", "Τελευταίες 30 Ημέρες", "Τελευταίες 90 Ημέρες", "Τελευταίες 182 Ημέρες" και «Τελευταίες 365 ημερες». Ο ασθενής θα πρέπει να στείλει τους αριθμούς αυτούς στο γιατρό όταν χρειάζεται.

Ημέρες Χρήσης

l. Θα εμφανιστεί ο αριθμός των διανυκτερεύσεων του RESmart® Auto που χρησιμοποιήθηκε για θεραπεία περισσότερο από 4 ώρες. Αυτή η οθόνη είναι μόνο για αναφορά. Ο ιατρός ή πάροχος σας μπορεί περιοδικά να σας ζητήσει αυτές τις πληροφορίες.

Use Days
0

Έξοδος από τις ρυθμίσεις

m. Όταν έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σας. Πατήστε το πλήκτρο χρήστη +/- για να μεταβείτε στη ρύθμιση SAVE και πιέζοντας το κουμπί της ράμπας να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές και να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων.

Συναρμολόγηση του κυκλώματος

6. Συναρμολογήστε το κύκλωμα. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, θα χρειαστείτε τα εξής αξεσουάρ:

- Η ρινική μάσκα με ενσωματωμένη θύρα εκπνοής
- 6 ft. (1,83 m) εύκαμπτος σωλήνας
- Κεφαλοδέτης (για τη μάσκα)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε περίπτωση που η συσκευή προορίζεται για χρήση από πολλά άτομα (πχ συσκευή για ενοικίαση κλπ), ένα χαμηλής αντίστασης αντι-βακτηριδιακό φίλτρο πρέπει να εγκατασταθεί μεταξύ του σωλήνα και της συσκευής. Οι πιέσεις πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον προμηθευτή σας σε περίπτωση που εγκαταστήσετε επιπλέον εξαρτήματα.

- a. Συνδέστε την εύκαμπτη σωλήνωση με την έξοδο του αέρα στο μπροστινό μέρος του RESmart® Auto.
- b. Εάν χρησιμοποιείτε μια μάσκα με ενσωματωμένη θύρα εκπνοής, συνδέστε την υποδοχή της μάσκας με την εύκαμπτη σωλήνωση.
- c. Εάν χρησιμοποιείτε μια μάσκα με ξεχωριστή θύρα εκπνοής, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θύρα εκπνοής. Τοποθετήστε τη θύρα εκπνοής έτσι ώστε να εξαερώνεται ο αέρας μακριά από το πρόσωπό σας.

Συνδέστε την υποδοχή της μάσκας με τη θύρα εκπνοής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην εμποδίζετε ή με άλλο τρόπο προσπαθήσετε να σφραγίσετε τα ανοίγματα αέρα (οπές εξαερισμού) στη θύρα εκπνοής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν χρησιμοποιείτε μια μάσκα ολόκληρου προσώπου (δηλαδή, μια μάσκα που καλύπτει τόσο το στόμα σας και τη μύτη σας), η μάσκα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ασφαλείας.

Διανομέας για την Ελλάδα

ALFACARE AE - Καλαβρύτων 46, Πάτρα - 2610 32 32 35 - www.alfacare.gr - info@alfacare.gr