


by **FLAEM**®

PERSONAL CARE WITH EASE

# Super-Eco<sup>+</sup>

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παροχή 0,40  
ml/λεπτό<sup>(1)(2)</sup>

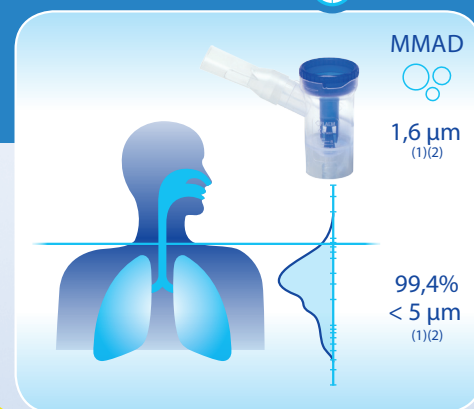

NEO

**RF8**

Η τελευταία εξέλιξη στη θεραπεία με νεφελοποιητή, απλός σχεδιασμός, χρήση και καθαρίσμα.



Μάσκες παιδικές και ενηλίκων, SOFT TOUCH για βέλτιστη εφαρμογή στο πρόσωπο.



Επαγγελματικό φίλτρο αέρα







Λαβή μεταφοράς

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Γρήγορος και αθόρυβος
- Για συνεχή χρήση
- In vitro πιστοποίηση από την TÜV
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρήση	Συνεχής	
Τάση / Ισχύς	230V ~ 50Hz / 130VA	
Φίλτρο Αέρα	Για καλύτερη ποιότητα, ο αέρας εισάγεται εξωτερικά της συσκευής και φιλτράρεται με ένα σύστημα υψηλής απόδοσης (πορώδες 50/70μm)	
Ροή εξόδου	9 l/min (περίπου)	
Μέγιστη πίεση	1.8 ± 0.3 bar	
Επίπεδο θορύβου (στο 1 μέτρο)	54 dB (A) (περίπου)	
Διαστάσεις	16,8(L) x 17,2 (P) x 10,7 (H) cm 16.8 (length) x 17.2 (width) x 10.7 (height) cm	
Βάρος	1,2 Kg	
Πιστοποιητικά	Συμμορφώνεται με την 93/42/EEC Οδηγία Ιατρικών Συσκευών	CE 0051
	Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10993-1 Βιολογική αξιολόγηση ιατρικών συσκευών	 
	Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60601-1 και EN60601-1-11	  <p>Mod.: P0106EM F400</p>

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δοχείου Νεφελοποίησης RF8

Ρυθμός νεφελοποίησης (1)	0,40 ml / min'
MMAD (1) (2) (ΜΑΔΜ - Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας)	1,6 μm
Ποσοστό εισπνεόμενου < 5 μm (1) (2)	99,4 %
Μέγιστη χωρητικότητα	8 ml

(1) Οι μέσες τιμές μετρήθηκαν με 0,9% διάλυμα χλωριούχου νατρίου σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία I29-P07.5 της FLAEM. (2) Μετρήθηκε με το ηλεκτρονικό σύστημα laser TSI Aerosizer 3220 σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία I29-P07.5 της FLAEM.

MMAD (3) 4,48 μm - Frazione respirabile < 5 μm (3) / Breathable fraction (FPF) (3) < 5 μm 55,5 % - (3) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. (3) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

## Εξαρτήματα

- Δοχείο νεφελοποίησης RF8, με επιστόμιο
- Μάσκα ενηλίκων Soft Touch
- Παιδική μάσκα Soft Touch
- Σωλήνας σύνδεσης 1 μέτρου
- Άνετη τσάντα μεταφοράς

## Super-Eco

Κωδικός	NU03P00
Μοντέλο	P0111EM F400
Κιβώτιο	6 τεμάχια
Εγγύηση	3 έτη



Fabbricante / Manufacturer:  
**FLAEM NUOVA S.p.A**  
 Via Colli Storicì, 221-223-225  
 25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)  
 Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287  
 E-mail: info@flaemnuova.it  
 www.flaemnuova.it



**FLAEM NUOVA S.p.A.**  
 è un'azienda con sistema di qualità certificato  
 Company with certified quality system



Καλαβρύτων 46, Τ.Κ.: 263 35, Πάτρα  
 ☎ 2610 32 32 35 - 31 23 23 ☎ 2610 620 200  
 🌐 www.alfacare.gr ✉ info@alfacare.gr  
 📺 Alfacare Greece 📺 alfacaregreece 📺 Alfacare